



Pneumologie Aërolizer®

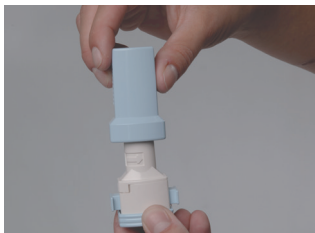

1. Verwijder de beschermkap.

2. Hou de aërolizer® rechtop.

Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl je het onderste deel van de inhalator vasthoudt.

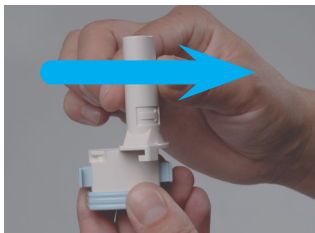


3. Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene opening.

4. Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).



5. Houd de aërolizer® rechtop en druk beide blauwe knoppen volledig en gelijktijdig in. De capsule wordt doorprikt.

6. Neem een rechtzittende houding aan.

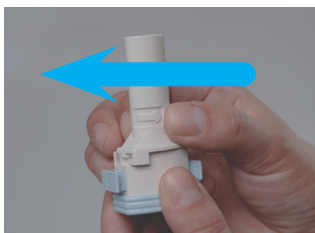

7. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

8. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.



9. Buig het hoofd licht achterover.

10. Adem snel en diep in.

11. Hou de adem 5 à 10 seconden in **en neem ondertussen de inhalator uit de mond.**



12. Adem rustig uit langs de mond.
(niet in de inhalator)

13. **Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken.**



14. Open het mondstuk en **verwijder de lege capsule.** Draai het mondstuk terug dicht en plaats de beschermkap terug.

15. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

- Vervang de aërolizer® maandelijks.
- Bewaar de aërolizer® en de verpakking op een droge, koele plaats.
- Adem nooit uit in de aërolizer®.

MY PUFF, nieuwe eenvoudige app voor je inhalator!



My Puff - Android



My Puff - Apple