


Pneumologie Autohaler®

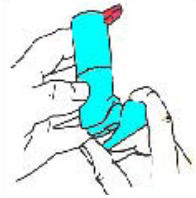

Autohaler®: Techniek.

1. Neem een rechthoudende houding aan.
2. Neem het dopje van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.
3. Houd de autohaler® rechtop. **Duw de hefboom bovenaan het toestel naar boven.** De autohaler® is nu geladen.
4. Blijf de autohaler® rechtop houden en zorg dat je hand de inhaalopening aan de onderzijde niet afsluit.
5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de tanden.
7. Buig het hoofd lichtjes achterover.
8. Adem langzaam en diep in, zodat je een 'klik' hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt.
9. Hou de adem 5 à 10 seconden in **en neem ondertussen de inhalator uit de mond.**
10. Adem rustig uit langs de mond.
11. **Breng de hefboom terug naar beneden.**
12. Indien meerdere dosissen: herhaal stap 3 tot 11.
13. Plaats de dop terug op het mondstuk.
14. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

- Bewaar de autohaler® op een droge, koele plaats.
- Adem nooit uit in de autohaler®.
- De autohaler® is leeg indien zichtbaar niets meer vrijkomt.

Autohaler®: eerste gebruik

Als dit een **nieuw** apparaat is of als je het **gedurende twee weken of meer niet gebruikt** heeft, moet je het voor gebruik eerst klaarmaken door twee dosissen op de volgende wijze in de lucht te verstuiven:



1. Neem de dop van het mondstuk door het lipje aan de achterzijde naar beneden te trekken.



2. Houd de autohaler® rechtop. Duw de hefboom boven aan het toestel naar boven.



3. Richt de opening van het mondstuk van je weg, zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven. Om een eerste dosis vrij te maken, duw het schuifje onderaan het toestel in de richting van de pijl.



4. Duw de hefboom terug naar beneden.

5. Herhaal de stappen 2 en 3 om een tweede dosis vrij te maken. **Nadat een tweede dosis is vrijgekomen, duw je de hefboom opnieuw naar beneden.** De autohaler® is nu klaar voor gebruik.

MY PUFF, nieuwe eenvoudige app voor je inhalator!



My Puff - Android



My Puff - Apple