

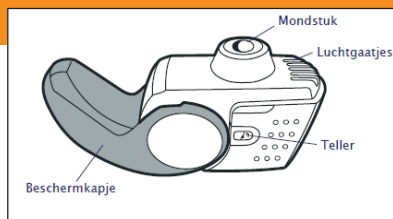



Pneumologie Nexthaler®

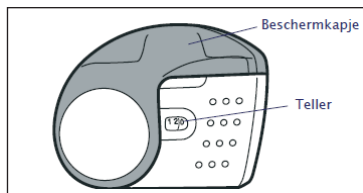


1. Houd de NEXThaler® vast met het beschermkapje naar boven.

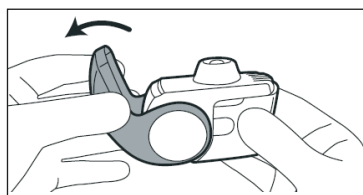


2. Open de NEXThaler® vlak voor gebruik: houd de NEXThaler® stevig vast en draai het beschermkapje helemaal open.

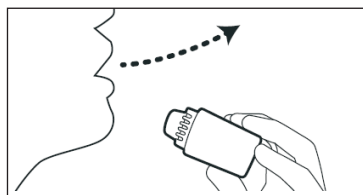


3. Ga rechtop zitten of staan.
Adem uit. Doe dit langzaam en volledig.
Adem niet uit in de NEXThaler®.

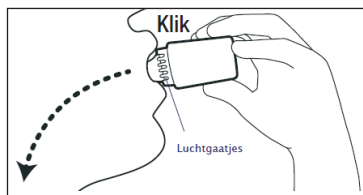

4. Neem het mondstuk tussen je tanden en sluit je lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaatjes vrij blijven.
6. Buig het hoofd licht achterover
7. Adem snel en diep in tot je een 'klik' hoort en blijf verder inademen.

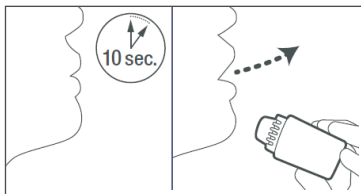

8. Neem de inhalator van de mond en houd de adem 5à10 seconden in of zolang als comfortabel is.
Adem uit.
Adem niet uit in de NEXThaler®.

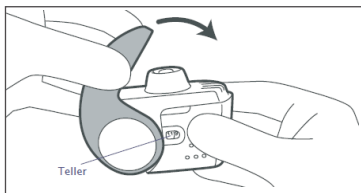

9. Doe de NEXThaler® dicht: sluit het beschermkapje. Controleer of de teller heeft afgeteld.
10. Heeft je arts meer dan 1 puffje per keer voorgeschreven, herhaal dan stap 1 tot en met 8.
11. Spoel je mond en keel met water.

Aanbevelingen:

- Adem nooit uit in de inhalator.
- In de NEXThaler® zitten 120 puffjes (inhalaties), de teller (zie tekening eerste pagina) geeft aan hoeveel puffjes er nog over zijn.
- Neem het mondstuk met een droge tissue af. Nooit afspoelen met water.
- Bewaar de NEXThaler® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of keuken).
- Goed tanden poetsen is extra belangrijk als je medicijnen inhaleert.
Het voor komt tandbederf.
- Meer weten over de werking van je medicijn of bijwerkingen? Lees de bijsluiter.

MY PUFF, nieuwe eenvoudige app voor je inhalator!

