


Pneumologie Voorzetkamer



2

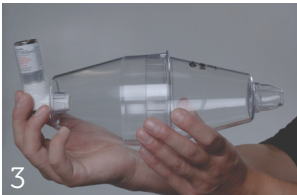

3



4

- 1 Neem een rechtzittende houding aan.
- 2 Neem het dopje van het mondstuk van de inhalator.
Schud de dosisaërosol krachtig gedurende enkele seconden.
- 3 Sluit de dosisaërosol aan op de voorzetkamer.
- 4 Neem het mondstuk van de voorzetkamer in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 5 Buig het hoofd licht achterover.
- 6 Adem rustig en volledig uit en stop met ademen.
- 7 **Verstuif één puf** in de voorzetkamer.
- 8 Adem nu pas **langzaam en diep** in (binnen de 10 seconden na het verstuiven van de puf).
- 9 Hou de adem 5 à 10 seconden in.
- 10 Adem rustig uit langs de mond.
- 11 **Adem nog 4 tot 5 maal rustig in en uit langs de voorzetkamer.**
- 12 Indien je meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 11.
- 13 Verwijder de dosisaërosol en plaats het dopje terug op het mondstuk van de inhalator.
Bewaar de voorzetkamer op een droge en stofvrije plaats.
- 14 Spoel de mond met water (niet inslikken).

Aanbevelingen:

- Bij het eerste gebruik van de dosisaërosol, verstuif 2 dosissen in de lucht.
- Bewaar de dosisaërosol op een droge, koele plaats.
- De inhalator is leeg indien zichtbaar niets meer vrijkomt.



1



2



3



5

Voorzetkamer: eerste gebruik / reiniging.

1. Haal de verschillende onderdelen van de voorzetkamer uit elkaar.
2. Leg de onderdelen in een kom met **water en een scheut afwasmiddel**. Zorg ervoor dat de onderdelen **volledig ondergedompeld** zijn.
3. Laat de onderdelen, ondergedompeld, weken gedurende **30 minuten**.
4. Haal de onderdelen uit de kom. Schud de inhalatiekamer om overtollig zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van de klep.
5. Laat de onderdelen **drogen** op een zuivere doek **gedurende minstens 6 uur** (best 's avonds na de laatste inhalatie)

NIET afspoelen!

NIET afdrogen met een doek!

6. Plaats de droge onderdelen opnieuw in elkaar.

Herhaal deze procedure éénmaal per week!

MY PUFF, nieuwe eenvoudige app voor je inhalator!



My Puff - Android



My Puff - Apple